

血氧測試機 S9

- 操作簡易
- 準確量度血氧和脈搏
- 低耗電
- 電量顯示
- 無訊號自動關機
- 顯示屏自動轉換角度(上、下、左、右)



- 血氧檢測範圍: 35%-100%
- 脈搏檢測範圍: 30-250bpm
- 分析力: +1%
- 顯示屏: OLED 彩色
- 預備時間: 10min
- 靈敏度: -0.5 cmH₂O
- 尺寸: 5.9 x 3.6 x 3.4(cm)
- 重量: 60g(連電池)
- 電池: AAA x 2
- 耗電量: 30mA



藥物化霧器 BD5000

- 壓縮空氣型
- 化霧速度: 0.2ml(每分鐘)
- 寧靜程度: 大約58分貝
- 藥霧微粒: 2.44微米
- 尺寸: 21x15.5x10(cm)
- 重量: 1.4kg



藥物化霧器 Handyneb Plus H600

- 手提超聲波型
- 尺寸: 7.5 x 4 x 20.5(cm)
- 重量: 2.2磅
- 化霧速度: 可調致達0.6ml(每分鐘)
- 寧靜程度: 少於50分貝
- 藥霧微粒: 少於5微米
- 配備: 旅行袋及乾濕電兩用



抽痰機 18605

- 尺寸: 36 x 17.8 x 20.3(cm)
- 重量: 3.3公斤
- 吸力: 0-600mmHg
- 寧靜程度: 少於60分貝
- 配備: 內置12VDC電池,備用長達1小時



最高呼氣流量計 AsmaPlan+

- 用途: 測量最高呼氣流量(PEFR)以作記錄
- 用者: 哮喘或慢性支氣管病之人士
- 特點: 方便易用,適合任何年齡人士



提供不同種類配件:



7" / 15" / 25" 鼻喉/駁喉

氧氣面罩


氣管造口氧氣罩



濕潤器/乾咀/駁咀



耳托/耳托連鼻喉

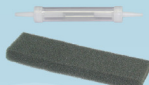

隔水器/隔塵網



儲氣型省氧喉



橫/直型手提袋



氧氣瓶伸縮手推車

專業服務流程:

1) 客人可在醫院內免費試機,如需出院,可即日送機



2) 專人免費送貨及指導用機(假日/晚上亦可安排送機)



3) 送機後7日內上門進行血氧測試及跟進用機情況



4) 血氧測試報告交回有關醫護人員作日後跟進



7) 應醫護人員轉介可作呼氣末端二氧化碳測試



6) 24小時緊急查詢及維修服務



5) 定期上門檢查保養,確保用機質素




甚麼是慢性阻塞性肺病(COPD)?

慢性阻塞性肺病COPD簡稱[慢阻肺病]一般是指會令氣管收窄的疾病,當中亦包括哮喘、慢性支氣管炎及破壞氣管末端富彈性的肺氣泡的疾病如肺氣腫等,亦屬於[慢阻肺病]。吸煙是慢阻肺病最主要的成因,而空氣污染及長期在大量塵埃的環境下工作也是引發因素。

長期氧氣治療對慢阻肺病有何幫助?


長期氧氣治療的目標是要把血中含氧量提升,以維持細胞組織的需要,並減輕患者心肺之負荷。從而改善換氣量不足及二氧化碳過度積聚的現象。含氧量過低的慢阻肺病患者,當長期接受氧氣治療後可提高生生活率、生活質素、運動耐力亦都有明顯改善。

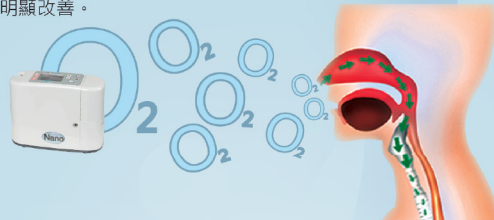

慢性阻塞性肺病所導致的問題

慢阻肺病患者隨著病情變化,當血液中含氧量過低時會有機會導致細胞組織缺氧。而長期血含氧量過低時,容易引致肺動脈收縮及血壓升高,情況嚴重時或會導致心臟衰竭等嚴重後果。當氣管收窄時,空氣難以進出呼吸道,患者會有:

- ~ 經常咳嗽
- ~ 氣促及呼吸困難
- ~ 容易疲倦、體重下降
- ~ 活動能力下降等病徵

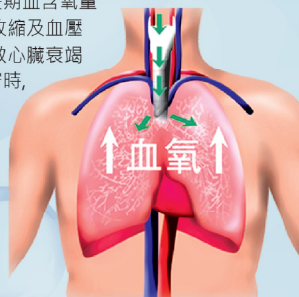

康健醫療用品有限公司

於一九九六年成立,一直致力為患有呼吸系統疾病之病人提供專業及優質的服務,各類產品並獲有品質認證,為求用者得到安心及妥善的治療。

聯絡我們

火炭山尾街31號華樂工業中心D座15樓35室
Tel: 2687 6380 Fax: 2690 1282

Website: www.medicare.com.hk
E-mail: medicare@medicare.com.hk

▶ 24小時緊急維修熱線: 72728822 ◀

以上產品尺寸及款式如有更改,恕不另行通知

康健醫療運送專車

本公司擁有龐大車隊,為用者提供全港即日/翌日送貨服務

氧氣瓶專車更擁有由消防處發出運送第二類危險品認證,可安全、合法及快捷地把氧氣瓶送給客戶

首創開設24小時緊急維修專車,可更快捷有效支援用者所需,令服務質素提高



康健醫療用品有限公司
Medicare Health Products Co. Ltd.

家居氧氣治療

- 家用氧氣機
- 手提氧氣瓶
- 減壓錶
- 省氧器
- 手提氧氣機
- 呼吸類儀器



家用氧氣機 Nuvo Lite

- 氧氣濃度: 5LPM: 90% (+6.5% / -3%)
- 尺寸: 58 x 35 x 22(cm)
- 重量: 32lb
- 電壓: 230V
- 耗電量: 300W
- 流量: 0.125 至 5 LPM
- 壓力: 7PSIG
- 少於40分貝



轉盤式流量-易於掌握
位置-設於機頂,方便調校
字體-特大、分明
流量-可鎖定或設定範圍
燈號-夜間指示更為清晰



多重過濾-氧氣更清新
外-清洗式隔塵網
中-微塵過濾盒
內-超微細菌過濾膜

家用氧氣機 Mark 5 Plus

- 氧氣濃度: 5LPM: 90% (+6.5% / -3%)
- 尺寸: 66 x 38 x 38(cm)
- 重量: 62lb
- 電壓: 230V
- 耗電量: 400W
- 流量: 0.125 至 5 LPM
- 壓力: 9PSIG
- 少於45分貝



轉盤式流量-易於掌握
位置-設於機頂,方便調校
字體-特大、分明
流量-可鎖定或設定範圍
燈號-夜間指示更為清晰

手提氧氣瓶 減壓錶

- 本公司手提氧氣瓶由美國入口,符合香港消防規則
- 氧氣濃度符合美國藥典要求



型號	容量	使用時間				
		1L	2L	3L	4L	5L
B Size	170L	2:50	1:25	0:56	0:42	0:34
C Size	255L	4:15	2:07	1:25	1:04	0:51
D Size	425L	7:06	3:32	2:21	1:46	1:25
E Size	680L	11:20	5:40	3:46	2:50	2:16

*以上使用時間是以連續供氧模式計算,每支氧氣容量與實際可能有所偏差。

電動式省氧器 IVY

- 細小輕巧
- 內含德國Piezo valve
- 每節省氧度數可即時轉為直出流量輸出
- 超高靈敏度
- 長時間續航力
- 提供連續 / 省氧模式
- 防水
- 警號、燈號、震動提示 (無呼吸、無氧氣、低電量)



IVY アイビー
內含德國電子感應閥 (Piezo valve) from Festo AG

4倍*
省氧度

氣動式省氧器 Sanpo Free

- 一身式設計
- 氣動式免電池
- 超高靈敏度
- 高效省氧
- 提供連續 / 省氧模式



獨家設計:
可調校供氧靈敏度

3.8倍*
省氧度

電動式省氧器 Smart Dose Mini

- 細小輕巧
- 長時間續航力
- 提供連續 / 省氧模式
- 有具吸氣指示燈



模式轉換掣

3倍
省氧度

手提氧氣機 Nano

- 同級最輕
- 方便攜帶
- LCD彩色屏幕
- 簡單按鍵控制
- 防火勢進入設計
- 警報指示:
(無呼吸、低濃度、低電量)
每15秒2次短啤聲
黃色燈號
- 安全機制: 如無呼吸15秒,自動供氧20BPM



- 氧氣濃度: 90% (+6% / -3%)
- 省氧調節度數: 1-5
- 壓力: 25PSIG
- 預備時間: 2min
- 靈敏度: <0.12 cm H2O
- 尺寸: 23 x 9 x 17(cm)
- 重量: 4.7lb(2.1kg)
- 國際電壓: 100-240v
- 儲電池: 14.4 VDC Voltage / 6.8Ah Rated Capacity
- 續航力: 最少4hrs
- 充電時間: 不多於4hrs
- 顯示屏: 2.8" LCD
- 少於49分貝
- 防水級別: IP22



減震保護套



- LCD彩色屏幕,清晰易用

設定	1	2	3	4	5
單電池 (hrs)	4.0	3.7	2.8	2.2	1.5
雙電池 (hrs)	8.0	7.4	5.6	4.4	3.0

*以上使用時間是以用者每分鐘呼吸20次為單位,有可能與實際的有所偏差。


Flow Control Settings and Pulse Volumes

Settings	1	2	3	4	5
Breath Rate	Pulse Volumes (ml)				
10	21	42	63	84	100
15	14	28	42	58	66.7
20	10.5	21	31.5	42	50
25	8.4	16.8	25.2	33.6	40
30	7	14	21	28	33.3
35	6	12	18	24	28.6
40	5.3	10.5	15.5	21	25

*以上使用時間有可能與實際的有所偏差。

手提氧氣機 Live Active Five

- 細小輕巧
- 方便攜帶
- LCD屏幕
- 簡單按鍵控制
- VPSA技術 (令供氧組件更耐用)
- CMV技術: 不同呼吸頻率,均能供氧
- 警報指示: 無呼吸、高呼吸頻率、喉管阻塞、低濃度和電量
- 安全機制: 如無呼吸60秒,即會自動供氧20BPM

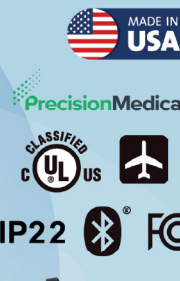

- 氧氣濃度: 87%-95.5%
- 省氧調節度數: 1-5
- 壓力: 12PSIG
- 預備時間: 2min
- 靈敏度: <0.45 cmH2O
- 尺寸: 21.6 x 8.1 x 21.3(cm)
- 重量: 5lb(2.2kg)
- 國際電壓: 100-240v
- 儲電池: 14.8 VDC / 6.4Ah, 94.7Wh
- 續航力: 6hrs
- 充電時間: 2hrs
- 顯示屏: LCD
- 少於40分貝
- 防水級別: IP22



設定	輸出氧氣量(分鐘)	續航力*
1:	220 +/-15% mL/min	6.5hrs
2:	440 +/-15% mL/min	4.3hrs
3:	660 +/-15% mL/min	2.7hrs
4:	880 +/-15% mL/min	2.0hrs
5:	1000 +/-15% mL/min	1.5hrs

*使用時間是以用者每分鐘呼吸20次為單位,有可能與實際的有所偏差。

手提氧氣機 Easy Pluse TOC

- 高效易用
- 轉盤式流量控制
- 拖拉式移動設計
- 三色燈號
- CMV技術: 不同呼吸頻率,均能供氧
- 警報指示:
無呼吸、高呼吸頻率、喉管阻塞、低濃度和電量
- 安全機制: 如無呼吸60秒,即會自動供氧20BPM



- 氧氣濃度: 87%-95.5%
- 連續輸出流量: 1/8-2L/min
- 省氧調節度數: 1-5
- 壓力: 10PSIG
- 預備時間: <10min
- 靈敏度: -0.25至-0.35cmH2O
- 呼吸頻率: 15 至 35BPM
- 尺寸: 26.7 x 17.8 x 37.2(cm)
- 重量: 11.5lb(5.2kg)
- 國際電壓: 100-240v
- 儲電池: 14 VDC 6.6Ah
- 續航力: 3hrs
- 少於42分貝
- 防水級別: IP22



轉盤式調節
連續供氧模式



移動組件

Modes of Operation

設定:	輸出氧氣量(分鐘)	續航力*	連續模式續航力*:
1:	240 +/-15% mL/min	3.3 Hours	1/8: 5.0 hours
2:	380 +/-15% mL/min	3.0 Hours	1/4: 4.3 hours
3:	520 +/-15% mL/min	2.8 Hours	1/2: 3.3 hours
4:	660 +/-15% mL/min	2.5 Hours	1: 1.8 hours
5:	780 +/-15% mL/min	2.3 Hours	2: 0.8 hours

*使用時間是以用者每分鐘呼吸20次為單位,有可能與實際的有所偏差。